

SF

Flussimetri

I flussimetri della serie SF sono sistemi per l'erogazione di gas medicali utilizzati per terapie respiratorie.

STRUTTURA

I flussimetri della serie **SF** sono realizzati con struttura in alluminio anodizzato e sono disponibili in varianti da uno a quattro tubi di misura graduati sulle quali è assemblata un'unità di dosaggio. Le entrate, sulla base dell'unità di alimentazione, sono allestite per essere raccordate ai circuiti ospedalieri di distribuzione centralizzata dei gas oppure alle bombole complete di riduttori di pressione. All'uscita dell'unità di dosaggio può essere collegato un evaporatore d'anestesia (solo per uso veterinario).

Informazioni principali



Il flussimetro **SF** può essere fornito con uno o più tubi di misura graduati.

Prodotti correlati




Tubi e innesti per vari gas
da p. 155



O₂+ sistema by-pass
p. 136

	SF 1	SF 2	SF 3	SF 4
DIMENSIONI (AxLxP)	300x76x117 mm	300x116x117 mm	300x140x117 mm	300x172x117 mm
PESO	1,19 Kg	1,63 Kg	2,05 Kg	2,47Kg
CAMPO DI DOSAGGIO	O ₂	0,1 - 1 L/min. 0,1 - 8 L/min. 0,2 - 15 L/min.		
	Aria	0,2 - 15 L/min.		
	N ₂ O	0,1 - 1 L/min. 0,2 - 12 L/min.		
	ACCURATEZZA	±10% del valore letto o ±0,15 L/min quale maggiore (±10% V.F.S. per portate F.S. ≤ 1 L/min)		
PRESSIONI DI INGRESSO	max 5 bar			
LIVELLO DI PERDITA, LATO IN PRESSIONE (PRIMA DEL RUBINETTO DI REGOLAZIONE)	meno di 25 ml/min. nelle normali condizioni di pressione (ISO 5358)			
LIVELLO DI PERDITA, LATO BASSA PRESSIONE (DOPO I RUBINETTI DI REGOLAZIONE, ESCLUSO IL VAPORIZZATORE)	meno di 25 ml/min. a 30 cm H ₂ O			
USCITA DEI GAS MISCELATI	Ø 22 M. - 15 F. ISO DIN 5356-1 oppure connessione conica 23 mm F. ISO DIN 5356/1 (solo per uso veterinario)			
CONNESSIONI DI ENTRATA DEI GAS	portagomma Ø 6 mm			

- 1 Manopole di regolazione del gas.
- 2 Dettaglio dei portagomma d'ingresso.

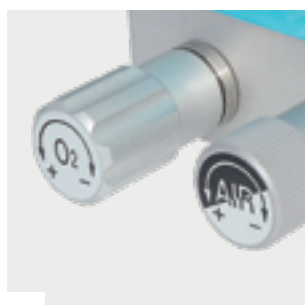

1



2