

# Contenitori di raccolta di grande capacità

I contenitori di raccolta per grandi volumi di liquidi aspirati denominati MAK/1000, MAK/2000 e MAK/4000, vengono utilizzati per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione e sono stati progettati e costruiti per applicazioni di "alto flusso ed alto vuoto".

## STRUTTURA

Vaso e coperchio sono realizzati in policarbonato e due raccordi diritti sono integrati nel coperchio (tranne nella versione per il collegamento diretto al regolatore di vuoto che dispone di raccordo in ottone cromato e ghiera di connessione in policarbonato). Tutti i contenitori dispongono di valvola di troppo pieno, sono corredati di due connettori ad angolo che garantiscono ogni possibile opzione di collegamento del contenitore di raccolta con la linea di aspirazione e con il paziente, e sono ovviamente sterilizzabili in autoclave (121 °C - 15 min.). Qualora siano richieste temperature di sterilizzazione più elevate, è disponibile una versione in polisulfone per le 3 misure (134 °C - 18 min.). Una scala esterna graduata fornisce le indicazioni sul livello di riempimento. In abbinamento ai numerosi accessori di supporto fornibili a richiesta, i vasi della serie **MAK** garantiscono una notevole versatilità e semplicità d'impiego.

## Informazioni principali



Disponibili con capacità di 1000 ml con coperchio a vite, di 2000 ml con coperchio a vite ed a pressione e 4000 ml con coperchio a pressione. Le versioni da 1000 ml e 2000 ml prevedono anche un'opzione con speciale coperchio con connessione diretta al regolatore di vuoto.

## Prodotti correlati




Regolatori di vuoto  
da p. 69



Aspiratori Venturi  
e valvole a battente  
idraulico  
da p. 79

|                                     | MAK/1000                                                                                            | MAK/2000<br>con coperchio<br>a vite | MAK/2000<br>con coperchio<br>a pressione | MAK/4000       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| <b>VOLUME INTERNO</b>               | 1000 ml                                                                                             | 2000 ml                             | 2000 ml                                  | 4000 ml        |
| <b>DIMENSIONI (AxLxP)</b>           | 248x108x108 mm                                                                                      | 300x134x134 mm                      | 300x126x126 mm                           | 323x175x175 mm |
| <b>PESO</b>                         | 0,38 Kg                                                                                             | 0,49 Kg                             | 0,49 Kg                                  | 0,99 Kg        |
| <b>DEPRESSIONE DI ALIMENTAZIONE</b> | max -950 mbar - 5 min                                                                               |                                     |                                          |                |
| <b>VALVOLA DI TROPPO PIENO</b>      | a galleggiante                                                                                      |                                     |                                          |                |
| <b>CONNESSIONI DI ENTRATA</b>       | portagomma Ø 8,0÷9,0 mm oppure ISO G 1/2" F.<br>(solo per MAK/1000 e MAK/2000 con coperchio a vite) |                                     |                                          |                |
| <b>CONNESSIONI DI USCITA</b>        | portagomma Ø 8,0÷9,0 mm                                                                             |                                     |                                          |                |

- 1 **Coperchio a vite (MAK/1000 e MAK/2000)**  
con vista della valvola di troppo pieno e connettori ad angolo removibili.
- 2 **Coperchio a pressione (MAK/2000 e MAK/4000)**  
con vista della valvola di troppo pieno e connettori ad angolo removibili.
- 3 **Coperchio nella versione** per collegamento diretto al **regolatore di vuoto** e con connettore ad angolo.
- 4 I contenitori di raccolta **MAK** di grande capacità sono disponibili anche nella versione in polisulfone.

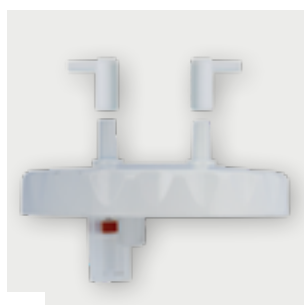

1



2



3



4